

アクアフロートマットレス (床ずれ防止用具)

ベッドで上体を起こしたときに臀部にかかる圧力を効果的に分散する「アクアセル」内蔵のマットレス。

体圧を分散する


アクアセル

水溶液の流動性を生かして、寝ているときだけでなく、上体を起こしたときに臀部にかかる圧力を効果的に分散します。




体圧分散性能 ベッドで上体を起こしたとき(背60° 膝10°) (仰臥位)

■アクアセルあり

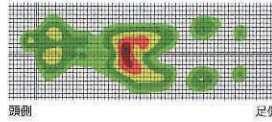

■アクアセルなし

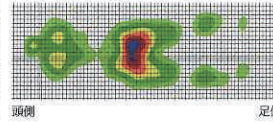

低 圧力 高
※被験者は身長165cm、体重65kg、男性。当社測定方法による。

上半身部

身体の支持性が高いウレタンフォームを使用することで、優れた体圧分散性能を有しながら、からだの沈み込みすぎを抑え、寝返りなどの動作をしやすくしています。

かかと部

カッティング加工を施すとともに、膝からかかとに向かってなだらかな傾斜を設けることで、かかとにかかる圧力を、ふくらはぎへ効果的に分散します。

側地

トップの側地には、クッション性を損なわないように、伸縮性に優れた生地を使用しています。

よい姿勢を保つ

端座位姿勢を安定させやすいかためのサイドエッジ



アクアフロートマットレス・清拭タイプ

■レギュラー

KE-831Q	91cm幅	00170-000505	¥120,000 (税抜)
KE-833Q	83cm幅	00170-000506	¥110,000 (税抜)

□持ち運び用ハンドル付き。

●材質：側地(トップ) / (フィルム) ポリウレタン30%、(基布) ポリエステル70%
側地(ボトム) / (基布) ポリエステル68%、(フィルム) ポリウレタン32%
クッション材 / ポリエステル・ウレタンフォーム・水溶液

●寸法：KE-831Q / (幅) 91×(長) 191×(厚) 12cm KE-833Q / (幅) 83×(長) 191×(厚) 12cm
※側地には通気性がありません。

アクアフロートマットレス・通気タイプ

■レギュラー

KE-841Q	91cm幅	00170-000507	¥125,000 (税抜)
KE-843Q	83cm幅	00170-000508	¥115,000 (税抜)

■ミニ

KE-8411Q	91cm幅	00170-000511	¥125,000 (税抜)
KE-8431Q	83cm幅	00170-000512	¥115,000 (税抜)


□持ち運び用ハンドル付き。

●材質：側地(トップ) / ポリエステル
クッション材 / ポリエステル・ウレタンフォーム・水溶液


●寸法：KE-841Q / (幅) 91×(長) 191×(厚) 12cm KE-843Q / (幅) 83×(長) 191×(厚) 12cm
KE-8411Q / (幅) 91×(長) 180×(厚) 12cm KE-8431Q / (幅) 83×(長) 180×(厚) 12cm

体圧分散性能

■仰臥位

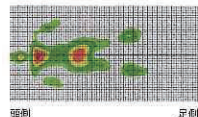

■背あけ75°+膝あけ10°

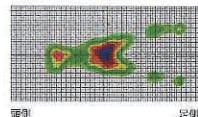

低 圧力 高
※被験者は身長168cm、体重65kg、男性。当社測定方法による。