

# 4 床ずれ予防マットレス


どんな時も。どこにも床ずれを作らない暮らしを。

## 驚くほどの除圧効果の高さです

- 口ホ・コンビネーションマットレス**  
ROHO® DRY FLOATATION®
- 体圧分散性能に優れた口ホを床ずれリスクのある部位に設定できる新形状マットレス。
  - 2枚タイプなら全身に使用可能。
  - マットレス端部は左右で硬さを変えてあり、端座位の安定性と立ち上がりをサポート。
  - 専用カバー付

商品番号	種別	価格(税抜)
5324-00	口ホ・マットレス (1枚)	¥78,000
5324-10	口ホ・コンビネーションマットレス 1枚タイプ	¥100,000
5324-11	口ホ・コンビネーションマットレス 2枚タイプ	¥150,000
4114-90	口ホ・マットレスくり抜き用マットレス	¥38,000

【口ホ・マットレス】●寸法/幅86×長さ49×高さ8.3cm ●材質/耐炎ネオプレンラバー、難燃性 ●ラテックス不使用 ●重量/マットレス(1枚)約3.6kg ●エアポンプ付 ●カバーは付いていません。 ●2年間保証  
【口ホ・マットレスくり抜き用マットレス】●寸法/幅91×長さ191×高さ10cm ●材質/本体:ウレタンフォーム、カバー:ポリエステル100%

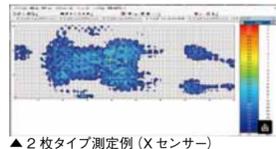

▲2枚タイプ測定例(Xセンサー)

介護保険  
レンタル  
対象品

## 長時間に及ぶ手術中も優れた体圧分散効果を発揮

- 手術台用マットレス ROHO・ORパッド**  
ROHO® DRY FLOATATION®
- 手術中に生じる圧力・ズレ・摩擦の軽減に効果的。
  - 体位・骨突出部位を選ばず、身体を広い面で支えます。
  - 身体が安定しやすい高さ約5cmのエアセルを使用。
  - 3分割セパレートタイプ。手術台のサイズに応じて組み合わせます。
  - 別売の専用カバーは防水、抗菌コーティング生地を使用。



▲専用カバー




商品番号	種別	価格(税抜)
5323-00	ROHO・ORパッド	¥280,000
5323-2T	専用カバー	¥33,000

●寸法/3セクション:約178×51×5cm(3セクションの内容/1枚:89×51×5cm、2枚:46×51×5cm) ●材質/ORパッド:耐炎ネオプレンラバー、難燃性 ●ラテックス不使用、カバー:ポリウレタン加工ポリエステル ●オートクレープ減菌不可 ●重量/約6.12kg ●エアポンプ付

## 新しくなったエアライト。空気調整不要。クッション高が低く、安定性と除圧効果を両立

### 口ホ・エアライト3 ROHO® AirLITE®

- 坐骨部分にエアセルを埋め込んだハイブリッド型クッション。
- 軽くて丈夫、撥水性に優れたカバーを採用。

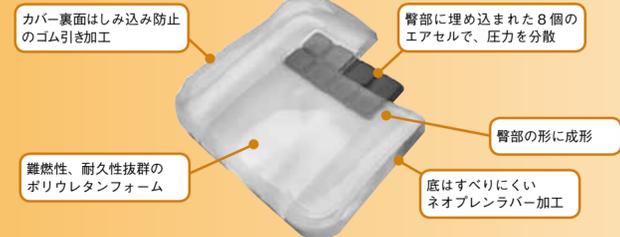

難燃性、耐久性抜群のポリウレタンフォーム

臀部に埋め込まれた8個のエアセルで、圧力を分散

臀部の形に成形

底はすべりにくいネオプレンラバー加工

新製品

2015年12月販売・レンタル開始



商品番号	種別	価格(税抜)
5326-25	38 × 38cm (失禁対応カバー付)	¥27,000
5326-26	41 × 41cm	

介護保険  
レンタル  
対象品

補装具費  
支給制度

## 口ホを初めて使う方・空気調整に自信のない方にも安心。口ホの空気調整が簡単にできます!

### 口ホ・スマートチェック ROHO® Smartcheck®

- 新機能のスマートチェック(空気圧センサー)が内部の圧を分析し、適圧になるとランプ(緑)でお知らせします。

商品番号	種別	価格(税抜)
5312-00	38 × 38cm (8 × 8)	¥66,000
5312-01	38 × 43cm (8 × 9) ハイタイプ	
5312-02	38 × 38cm (8 × 8) ミドルタイプ	¥66,000
5312-03	38 × 43cm (8 × 9)	

※上記口ホクッションは、スマートチェック用バルブのついた専用クッションです。

口ホ・スマートチェックは選定ガイドニーズ2の床ずれ予防最優先の製品となります。



▲口ホクッションミドルタイプ

▲スマートチェック

2015年12月販売開始

新製品

補装具費  
支給制度

**ABILITIES アビリティーズ**  
http://www.abilities.jp/  
フリーコール (無料通話) やさしいようぐを  
**0120-834490**

※商品の外観、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の関係で実物と異なる場合がございます。\*掲載価格には消費税は含まれておりません。このチラシの記載内容は2015年9月現在のものです。\*禁無断転載・複写 15-09-010.SG.100 × 80

本社 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウエストビル  
【営業所】札幌市/仙台市/栃木市/川口市/渋谷区/葛飾区/武蔵野市/府中市/八王子市/千葉市/船橋市/横浜市青葉区/横浜南区/平塚市/松本市/佐久市/新潟市/名古屋市/長久手市/金沢市/大阪府大東市/大阪府城東区/和泉市/尼崎市/神戸市/福山市/広島市/北九州市/福岡市

介護保険  
レンタル  
対象品

介護保険制度により、特定種目の福祉用具について月額使用料の9割が負担給付されます。(所得により負担が変わります。)

補装具費  
支給制度

障害、難病の方等に対象補装具購入または修理費の一部を支給する。区市町村実施による制度です。

ご相談・お買い求めは

# 抜群の床ずれ予防効果！ 素材はゴムでも難燃性なので安心！ 世界中で好評、採用されています！

# 口ホクッション

ROHO®

## 1 特長

### 簡単でわかりやすい調整


メンテナンスは空気量の確認と調整。取扱説明 CD-ROM か DVD のいずれかを観ながら行なえます。



### 考え抜かれた素材を使用

口ホクッションは、イギリスの厳しい難燃試験クリブ5にも合格。表面には特殊コーティングを施し、水分や汚れ(失禁)をはじき、においが残りません。

### 広い接触面で体圧を均等分散

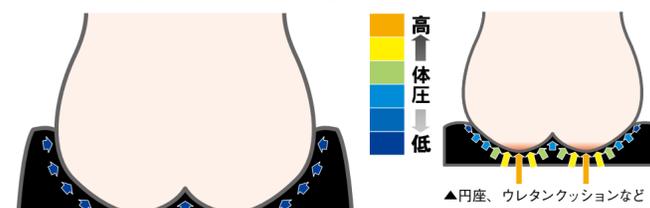

口ホクッションのエアセルの高さは最大10cm。座骨結節部、臀部、大腿部など深く沈み込ませて接触面積を格段に広げて体圧を分散します。

### セルの高さ実寸

口ホクッション ベストセラーシリーズ



ロータイプ  
セル高 約5cm


ミドルタイプ  
セル高 約8.3cm

ハイタイプ  
セル高 約10cm

### 空気がセル間を移動して圧力を分散

口ホクッションでは、柔軟なエアセルの中を空気が移動して、優れた除圧効果を発揮します。

圧力でエアセルがつぶれても、隣りてその隣のエアセルへと空気が移動して高い圧力がかかりません。

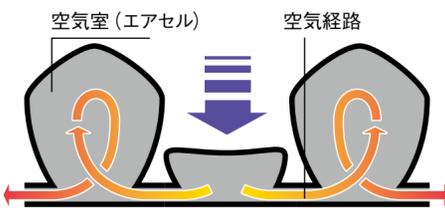

### 皮膚下の“ズレ”を予防

身体の動きと共に、エアセルの一つひとつが自由に動き、日常生活時に自然に発生するズレや摩擦から皮膚を守ります。



### クッションカバーにも機能性

部位ごとに生地を使い分けています。表面は、滑性が高く伸縮性に富み、エアセルの自在な動きを妨げず、皮膚との間の摩擦を軽減して床ずれ予防効果を高めます。側面のメッシュ生地は通気性を高め、裏面の滑り止め生地やベルクロテープは車いすや椅子からの滑落対策としています。



### 洗浄、消毒

汚れや失禁の時に水洗いができますので、ご自宅や施設での洗浄、消毒が簡単に行なえます。

### 修理

パンク修理キットが付属。簡単なパンク修理ならご自身でできます。また、アビリティーズ 口ホカスタマーセンターでは熟練スタッフが念入りな修理(有償)を行なっています。

### 保証期間

お買い求めの後、保証書請求カードに必要事項を記入し、投函してください。無償修理は口ホセレクト製品は36ヶ月、他の製品は24ヶ月、もしくは12ヶ月の長期保証をしています。

口ホクッションと口ホマットレスは「介護保険レンタル対象品」「補装具給付対象品」で、レンタルや給付を受けられる場合がございます。ご購入の前に、お住まいの市区町村の福祉窓口、ケアマネジャー、病院のソーシャルワーカーに相談されることをお勧めします。

# 2 選定ガイド

選定手順 1 利用者のニーズに合わせて選定します。

## ニーズ 1 ポジショニング・バランス最優先

姿勢に問題があり、高度なポジショニングが必要な方。床ずれリスクが中以上の方。

### 床ずれリスクが高く、仙骨座りの方、身体に傾きのある方向け

ロホ・クアドトロセレクト

■アイソフローバルブ ISOFLOR® (赤・緑のボタン)の操作で、シートを4分割して、各ユニット毎に空気量の調節をしたり、1バルブタイプのクッションと同じ使い方が可能。

〈ハイタイプ〉 ROHO® QUADTRO SELECT® HIGH PROFILE™

■すでに床ずれがある方、リスクが高い方。

■座位保持が困難な方。

〈ミドルタイプ〉 ROHO® QUADTRO SELECT® MID PROFILE™

■床ずれリスクが中程度以上の方。

■座位保持が困難な方。

〈ロータイプ〉 ROHO® QUADTRO SELECT® LOW PROFILE®

■床ずれリスクが低い方。

■座位保持が困難な方。

■安定性が必要な方。

商品番号	種別	価格(税抜)
5317-50	ハイ 38 × 38cm (8 × 8)	¥47,000
5317-51	ハイ 38 × 43cm (8 × 9)	¥47,000
5363-0T	ハイ オーダー 51 × 51cm (11 × 11) まで	¥71,000
5318-60	ミドル 38 × 38cm (8 × 8)	¥47,000
5318-61	ミドル 38 × 43cm (8 × 9)	¥47,000
5363-0T	ミドル オーダー 51 × 51cm (11 × 11) まで	¥71,000
5318-50	ロー 38 × 38cm (8 × 8)	¥47,000
5318-51	ロー 38 × 43cm (8 × 9)	¥47,000
5363-0T	ロー オーダー 51 × 51cm (11 × 11) まで	¥71,000

●材質/本体: 耐炎ネオプレソラバー(100%)、難燃性\*ラテックス不使用、カバー: 難燃性ポリエステル ●セルの高さ/ハイタイプ: 約10cm、ミドルタイプ: 約8.3cm、ロータイプ: 約5cm ●重量/ハイタイプ: 約1.2kg、ミドルタイプ: 約1.15kg、ロータイプ: 約0.85kg(8×8セル) ●エアポンプ付 ●3年間保証

### リクライニング・ティルト車いすご利用者向け。仙骨座り、身体に傾きのある方、円背の方向け

ロホ・コンツアーセレクト

■坐骨結節部周辺は低いセル、周辺は高いセルで座位を安定。

■アイソフローバルブにより、前後左右の座位バランスの保持とリクライニング時の底付きを予防。

■床ずれリスクが中程度以上の方。

■座位保持が困難な方。

〈ロータイプ〉 ROHO® CONTOUR SELECT®

■坐骨結節部周辺は低いセル、周辺は高いセルで座位を安定。

■2バルブで大腿部と坐骨結節部の空気量の個別調整可能。

■床ずれリスクが中程度以上の方。

■座位保持が困難な方。

〈ミドルタイプ〉 ROHO® CONTOUR SELECT® MID PROFILE™

■坐骨結節部周辺は低いセル、周辺は高いセルで座位を安定。

■アイソフローバルブにより、前後左右の座位バランスの保持とリクライニング時の底付きを予防。

■床ずれリスクが中程度以上の方。

■座位保持が困難な方。

〈ロータイプ〉 ROHO® CONTOUR SELECT® LOW PROFILE®

●材質/本体: 耐炎ネオプレソラバー(100%)、難燃性\*ラテックス不使用、カバー: 難燃性ポリエステル ●セルの高さ/ハイタイプ: 約1.2kg、ミドルタイプ: 約1.15kg、ロータイプ: 約0.85kg(8×8セル) ●エアポンプ付 ●3年間保証

### リクライニング・ティルト車いすご利用者向け 仙骨座りの方に最適

ロホ・エンハンサー

■坐骨結節部周辺は低いセル、周辺は高いセルで座位を安定。

■2バルブで大腿部と坐骨結節部の空気量の個別調整可能。

■床ずれリスクが中程度以上の方。

■座位保持が困難な方。

〈ミドルタイプ〉 ROHO® ENHANCER® MID PROFILE™

■坐骨結節部周辺は低いセル、周辺は高いセルで座位を安定。

■2バルブで大腿部と坐骨結節部の空気量の個別調整可能。

■床ずれリスクが中程度以上の方。

■座位保持が困難な方。

〈ロータイプ〉 ROHO® ENHANCER® LOW PROFILE®

●材質/本体: 耐炎ネオプレソラバー(100%)、難燃性\*ラテックス不使用、カバー: 難燃性ポリエステル ●セルの高さ/ハイタイプ: 約1.2kg、ミドルタイプ: 約1.15kg、ロータイプ: 約0.85kg(8×8セル) ●エアポンプ付 ●3年間保証

## ニーズ 3 座位安定性最優先

エアセルとフォームを組み合わせた製品。空気の移動量が少なく、座位の安定性を高めたタイプ。

### ロホ・エアライト3

詳しくは裏表紙をご覧ください

新製品



介護保険レンタル対象品

補装具費支給制度

### 柔らかめのベースで 移乗や着座の際にも安定

### ロホ・ハーモニークッション

■床ずれリスクが低い方。

■座位保持が可能な方に適します。

商品番号	種別	価格(税抜)
5317-52	36 × 41cm	
5317-60	41 × 41cm	¥25,000
5317-53	43 × 41cm	

●材質/ベース: ポリウレタン、エアセルパッド: PVC ●耐荷重/125kg ●生活防水カバー/エアポンプ付 ●重量/約0.6kg(41 × 41cm) ●1年間保証

### エアセル&フォームベース&ウレタンクッションで高い座位保持力

### ロホ・ハイブリッドエリート



▲写真は2バルブ

■ウレタン付のカバーで大腿部もしっかり除圧。仙骨座りには1バルブ、身体に傾きのある方と円背の方には2バルブがお勧め。安定感が格段に違います。

■床ずれリスクが低い方。

■座位保持が困難な方に適します。

■電動車いすをご利用の方に勧めます。

商品番号	種別	価格(税抜)
5316-04	1バルブ	
5316-14	36cm × 36cm 2バルブ	
5316-05	1バルブ	
5316-15	36cm × 38cm 2バルブ	
5316-00	38cm × 38cm 1バルブ	
5316-10	2バルブ	¥47,000
5316-01	38cm × 40cm 1バルブ	
5316-11	2バルブ	
5316-02	40cm × 40cm 1バルブ	
5316-12	2バルブ	
5316-03	40cm × 43cm 1バルブ	
5316-13	2バルブ	
5315-02	40cm × 40cm 1バルブ	
5315-12	失禁対応カバー付 2バルブ	¥53,800
5316-0T	オーダー (標準カバー付)	¥62,000
5315-0T	オーダー (失禁対応カバー付)	

●材質/フォームベース: 耐水性独立気泡ポリウレタンフォーム、エアセルパッド: 難燃性ネオプレソラバー、ラテックス不使用、標準カバー(後面、側面)難燃性ポリエステル、(前面、バルブ開口部)ポリエステル強化PVC、(カバー)背面コンフォートフォームポリウレタン、失禁対応カバー(後面、側面)ナイロン、ポリウレタントランスファー加工、その他標準カバーと共通 ●高さ/全体: 約10.8cm、セル: 約8.3cm ●エアポンプ付 ●重量/40 × 40cm標準カバー付: 約0.85kg、40 × 40cm失禁対応カバー付: 約1.3kg ●耐荷重/225kg ●2年間保証

## ニーズ 2 床ずれ予防最優先

高いセルにより効果的に床ずれを予防。床ずれがすでにある方、床ずれリスクの高い方、痛みで車いすに座れない方。骨突出している方向け。

### すでに座骨結節部に床ずれがある方、リスクの高い方

### ロホクッション ベストセラーシリーズ



〈ハイタイプ〉 ROHO® HIGH PROFILE®

■すでに床ずれがある方、リスクが高い方。

■座位保持が可能な方。

〈ミドルタイプ〉 ROHO® MID PROFILE™

■床ずれリスクが中程度の方。

■座位保持が可能な方。

〈ロータイプ〉 ROHO® LOW PROFILE®

■床ずれリスクが低い方。

■座位保持が可能な方。

■安定性が必要な方。

●材質/本体: 耐炎ネオプレソラバー(100%)、難燃性\*ラテックス不使用、カバー: 難燃性ポリエステル ●セルの高さ/ハイタイプ: 約10cm、ミドルタイプ: 約8.3cm、ロータイプ: 約5cm ●重量/ハイタイプ: 約1.15kg、ミドルタイプ: 約1.0kg、ロータイプ: 約0.8kg(8×8セル) ●エアポンプ付 ●2年間保証

商品番号	種別	価格(税抜)
5325-00	ハイ 38 × 38cm (8 × 8)	
5325-01	ハイ 38 × 43cm (8 × 9)	
5342-00	ハイ 33 × 33cm (7 × 7)	¥49,000
5342-01	ハイ 33 × 38cm (7 × 8)	
5325-02	ハイ 43 × 43cm (9 × 9)	
5347-0T	ハイ オーダー 1/4/7/51 × 51cm (11 × 11) まで	¥62,000
5348-0T	ハイ オーダー 2/1/7/51 × 51cm (11 × 11) まで	
5326-00	ミドル 38 × 38cm (8 × 8)	
5326-01	ミドル 38 × 43cm (8 × 9)	
5326-04	ミドル 33 × 33cm (7 × 7)	¥49,000
5326-05	ミドル 33 × 38cm (7 × 8)	
5326-15	ミドル 43 × 43cm (9 × 9)	
5326-0T	ミドル オーダー 1/4/7/51 × 51cm (11 × 11) まで	¥62,000
5321-00	ロー 38 × 38cm (8 × 8)	
5321-01	ロー 38 × 43cm (8 × 9)	
5321-05	ロー 29 × 33cm (6 × 7)	¥49,000
5343-00	ロー 33 × 33cm (7 × 7)	
5343-01	ロー 33 × 38cm (7 × 8)	
5321-06	ロー 43 × 43cm (9 × 9)	
5347-0T	ロー オーダー 1/4/7/51 × 51cm (11 × 11) まで	¥62,000
5348-0T	ロー オーダー 2/1/7/51 × 51cm (11 × 11) まで	



### 臀部から背中にかけて、床ずれリスクのある方に。

### ロホ・リクライナー

ROHO® DRY FLOATATION® Recliner

■リクライニング・ティルト車いす向け。

■エアセル高さやバルブ数がオーダーできます。体位が不安定な方に適します。


商品番号	種別	価格(税抜)
5322-0T	オーダー	¥129,000より

●材質/本体: 耐炎ネオプレソラバー(100%)、難燃性\*ラテックス不使用、カバー: 難燃性ポリエステル ●セルの高さ/ハイタイプ: 約10cm、ミドルタイプ: 約8.3cm、ロータイプ: 約5cm ●重量/ハイタイプ: 約1.15kg、ミドルタイプ: 約1.0kg、ロータイプ: 約0.8kg(8×8セル) ●エアポンプ付 ●2年間保証

## 選定手順 2

身体特性を考慮します。

- 床ずれリスクのレベルと床ずれの有無。痩せ型、お尻や太ももの筋肉や脂肪が無い方、骨突出が大きい方は、なるべくセルの高いタイプをお勧めします。
- 座位保持能力のレベルと床ずれの有無。ご自身で姿勢を変えられない方はセルの高いタイプをお勧めします。
- お尻に痛みを感じる方はセルの高いタイプをお勧めします。
- 身体の安定と床ずれの不安のある方はミドルタイプをお勧めします。
- 仙骨座り、身体に傾きのある方、円背のある方はクアドトロセレクト、コンツアーセレクト、ハイブリッドエリート 2 バルブをお勧めします。

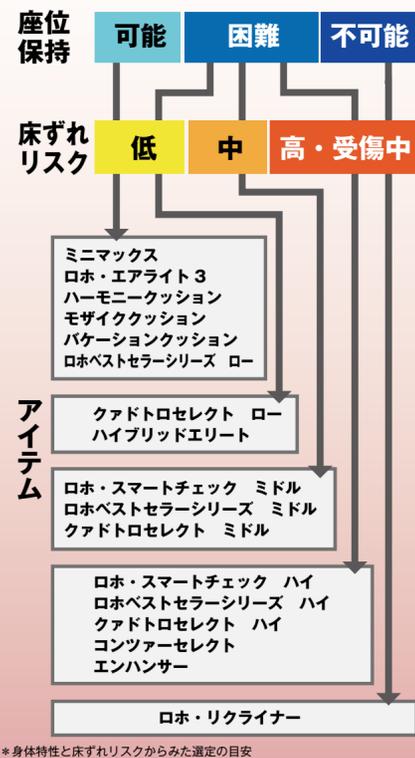

## 選定手順 3

使用環境を考慮します。

- 床ずれリスクの高い方、長時間、車いすに座られる方はセルの高いタイプをお勧めします。
- リクライニング・ティルト車いすを使われる方はコンツアーセレクト、エンハンサー、ロホリクライナーをお勧めします。
- 足こぎで車いすを使う方は、足こぎ用に設定でき、座面高の変化が少くないクアドトロセレクトシリーズをお勧めします。



床ずれに苦しむ多くの人々のために研究を続け、1973年に開発されたのが除圧効果に優れたロホクッションです。今や「ロホ社」は床ずれ予防クッションの世界のリーダーであり、世界中の多くのユーザーから愛され続けています。

## 3 床ずれ予防 関連商品

### 車いす座面シートのたわみを改善

### ソリッドシートインサート

■仙骨座り・身体の傾き改善、クッションの除圧性能を向上します。

●材質/基材(ポリウレタンコート) ●耐荷重/154kg ●重量/1.0kg ●1年間保証

商品番号	種別	価格(税抜)
5355-03	36cm × 36cm 用	
5355-04	38cm × 38cm 用	¥4,500
5355-05	40cm × 40cm 用	

### 軽量な立体形状ソリッドシート

### ロホ・コンツァーベース

■車いすシートのたわみを補正し、本来の除圧性能を保ちます。クッションがソリッドシート形状に象られ安定性も向上。

●材質/ポリウレタン ●耐荷重/135kg ●重量/約0.7kg ●1年間保証

商品番号	種別	価格(税抜)
5355-00	38 × 38cm	
5355-01	43 × 38cm	¥7,300
5355-02	43 × 45cm	

### エアスプリングによる衝撃吸収材

### ロホ・アダプター

ADAPTOR®

■エアセル(空気の袋)が自由に動くことで摩擦やずれを最小限に抑制。

■ハサミやカッターなどで切り分けて、多目的にご使用できます。

■肘あて、レッグフレーム、仙骨部分等での緩衝材として。

商品番号	価格(税抜)
5362-00	¥18,000

●サイズ/23×33cm ●材質/耐炎ネオプレソラバー(100%)、難燃性\*ラテックス不使用 ●重量/約240g ●2年間保証

### 排泄に時間がかかる方の負担を軽減します

### ロホ・トイレシート

■便座に装着して床ずれを予防。

■スナップ付で取付簡単。

商品番号	種別	価格(税抜)
5357-00		¥32,000
5357-01	別売専用カバー	¥9,500

●材質/耐炎ネオプレソラバー(100%)、難燃性\*ラテックス不使用 ●サイズ/幅約23×奥行約38cm ●重量/0.6kg ●エアポンプ付 ●2年間保証